




Pole Ideal Tajhiz Co.
www.medpit.com

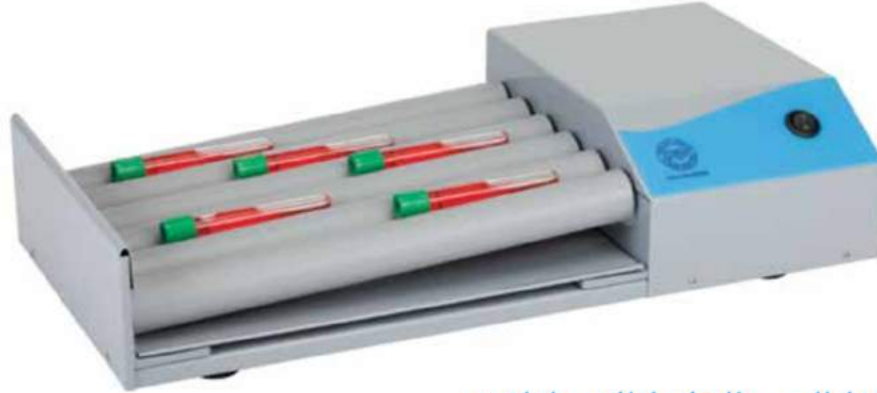

خلط الدم (الخلط الاسطواني)

خلط والحفاظ على المعلقات في المحاليل المخبرية بصورة موحدة



خلط الدم من شركة P.I.T. المكون من ست قنوات مناسب لخلط جميع أنواع عينات الدم والعينات اللزجة والمعلقات في السوائل وغير ذلك. الميزات الوظيفية لهذا الجهاز هي الحركة الدورانية والرأسية المتزامنة للأسطوانات. تم تصميم أبعاد الأسطوانات والمسافة بينها بحيث يمكن وضع أنواع مختلفة من الأنابيب والزجاجات لخلطها. لسهولة التجميع والنظافة في حالة الانسكاب المفاجئ للسوائل، يتم وضع صينية واقية قابلة للغسل تحت الأسطوانة. جسم ولون جهاز خلط الدم مقاومة للأحماض والمواد الكيميائية الأكثر شيوعاً في المختبرات.

المواصفات الفنية	
نطاق الحركة الرأسية	~20 mm
ابعاد الاسطوانات (القطر x الطول)	320 mm x φ 32 mm
سرعة الدوران	60 دورة في الدقيقة
الجهد	220 V
التردد	50 Hz
القوة القصوى	20 W
الوزن التقريبي	6/6 Kg

كود GS1	كود المنتج	ابعاد الجهاز
6265738000492	PITR6B	500 mm x 260 mm x 120 mm

رقم 13 ، الوحدة 11 ، شارع حجة دوست ، شارع جنوب فلسطين ، جادة كيشافارز ، طهران

فاكس: +98 2188994484

صندوق البريد: 1416694334

هاتف: 3-88994482